

Streamer Oticon Medical Fiche technique

Le Streamer Oticon Medical constitue la passerelle vers les solutions ConnectLine. Connectline permet aux utilisateurs des aides auditives sans fil présélectionnées par Oticon Medical¹ de participer et d'interagir dans un grand nombre de situations quotidiennes. Le système inclut des solutions spécifiques pour regarder la télévision, utiliser un téléphone fixe (ligne privée/analogique) et un microphone distant sans fil. Le Streamer Oticon Medical prend également en charge le Bluetooth pour la fonction kit mains libres des téléphones portables.

Système totalement intégré

Des fonctions avancées, telles que AutoPriority et AutoConnect permettent à l'utilisateur d'entendre un appel téléphonique et d'y répondre tout en regardant la télévision par exemple.

Kit mains libres pour les téléphones portables

Le Streamer Oticon Medical peut être appairé à la plupart des téléphones portables², transformant les aides auditives en une paire d'oreillettes haute qualité grâce au microphone intégré se trouvant sur la partie supérieure du Streamer Oticon Medical.

Bobine téléphonique

Le Streamer Oticon Medical possède un récepteur de boucle magnétique intégrée, pour les utilisateurs dont les aides auditives ne sont pas équipées d'une bobine téléphonique.

Application ConnectLine pour iPhone®, iPad®, iPod touch® et appareils Android™

L'application permet de régler, de manière intuitive et discrète, les appareils auditifs et les accessoires ConnectLine.

Disponible gratuitement dans l'App Store et Google Play™.



- Références :
1. Consultez les modèles d'aides auditives compatibles avec le Streamer Oticon Medical sur le site www.oticonmedical.fr/oticonmedicalstreamer
 2. Visitez www.oticonmedical.fr/connectline pour obtenir une liste actualisée des téléphones portables compatibles

Écouteur pour la musique

Le son peut être transmis directement et clairement aux aides auditives depuis un lecteur MP3 par exemple, à l'aide d'un câble (fourni) ou sans fil (par Bluetooth).

Adaptateur téléphonique ConnectLine

Il s'agit d'une solution spécifique à l'utilisation du téléphone fixe,

qui transforme le Streamer Oticon Medical et les aides auditives en oreillettes sans fil.

Adaptateur TV ConnectLine

Il s'agit d'une solution spécifique pour regarder la télévision grâce à la transmission directe du son de la télévision vers les aides auditives par l'intermédiaire du Streamer Oticon Medical.

Microphone ConnectLine

Petit et discret, le microphone à clipser sur le vêtement de votre interlocuteur transmet directement la conversation vers vos aides auditives par l'intermédiaire du Streamer Oticon Medical.

PC/VoIP – plug and play

En utilisant le câble fourni, le Streamer Oticon Medical peut être directement connecté à un ordinateur pour se transformer en écouteur.

Entrée FM

Le Streamer Oticon Medical possède une interface prenant en charge l'utilisation de récepteurs FM. Visitez le site www.oticon.fr pour de plus amples informations.

Because Sound Matters

Oticon Medical est une société internationale spécialisée dans les systèmes auditifs implantables. Notre objectif est de permettre à tous les utilisateurs d'accéder au monde merveilleux du son, à chaque étape de leur vie. Grâce à notre appartenance à l'un des plus grands groupes spécialisés dans les solutions auditives, et aux liens qui nous unissent à Oticon, nous bénéficions des dernières avancées technologiques issues de la recherche dans l'audition. Nos compétences résultent de plus d'un siècle d'innovations dans le domaine de l'audiologie et de décennies d'expérience pionnière en matière d'implant auditif.

Notre proximité des patients, et notre étroite collaboration avec les professionnels de l'audition, nous permettent de garantir que chaque produit créé intègre les besoins et les attentes des utilisateurs. Nous nous engageons à offrir des solutions auditives innovantes et le service associé, contribuant à améliorer la qualité de vie des patients, quel que soit leur mode ou style de vie. Parce que nous considérons la valeur que représente chaque son.

www.oticonmedical.fr

Distributeur

Identifiez votre distributeur local Oticon Medical sur le site www.oticonmedical.fr/omstreamerdistributeur

Fabricant

Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danemark
Tél. : +45 39 17 71 00
www.oticon.com



Vue générale du produit

Inclus :


- Tour de cou (long et moyen)³
- Adaptateur secteur pour la charge
- Housse de protection en silicone
- Kit câble d'interface PC/Audio

3. REMARQUE : le tour de cou fait partie intégrante du système, et doit toujours être utilisé pour une performance optimale.

Adaptateur téléphonique ConnectLine et téléphone portable

Microphone Connectline

Adaptateur TV ConnectLine

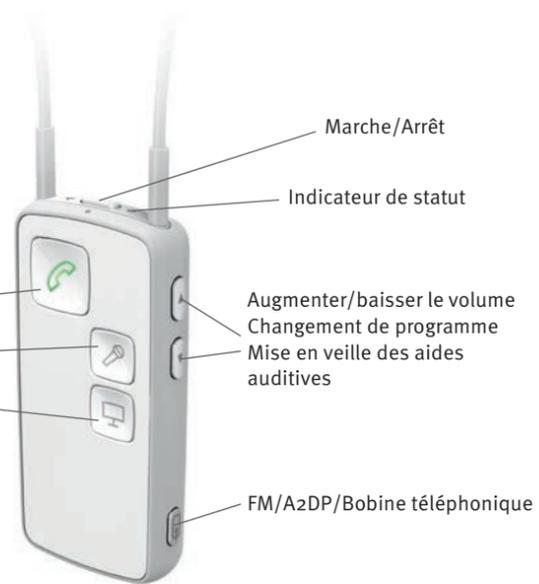

Vue générale du produit



Caractéristiques techniques

Compatibilité	Consultez les modèles d'aides auditives compatibles avec le Streamer Oticon Medical sur le site www.oticonmedical.fr/oticonmedicalstreamer . Les versions du logiciel Genie Medical, qui possèdent l'outil de paramétrage du Streamer, peuvent être utilisées pour la configuration du Streamer Oticon Medical.
Dimensions	13 x 40 x 85 mm; poids 44 g (sans le tour de cou)
Fonctions du système ConnectLine	AutoConnect (le Streamer Oticon Medical se connecte automatiquement aux dispositifs qui se trouvent à portée) AutoPriority (le Streamer Oticon Medical donne la priorité aux appels téléphoniques)
Solutions ConnectLine spécifiques	Microphone ConnectLine (requiert un équipement supplémentaire) Adaptateur téléphonique ConnectLine 1.0 et 2.0 (requiert un équipement supplémentaire) Adaptateur TV ConnectLine (requiert un équipement supplémentaire)
Autres solutions de connectivité	Entrée analogique (mini-jack de 3,5 mm) Sortie analogique (mini-jack de 3,5 mm), pour l'interface des écouteurs PC (VoIP/Skype) Oreillette pour téléphone portable (profil Bluetooth kit mains libres ou oreillette) Transmission/musique sans fil (Bluetooth A2DP) Entrée FM (Europlug Bobine téléphonique (intégrée))
Télécommande pour les aides auditives	Volume, changement de programme et désactivation des microphones des aides auditives
Batterie ⁴	Utilisation habituelle de 10 heures par jour : 6 heures de diffusion TV + 2 heures de téléphone/autre + 2 heures en veille (capacité de 100 % à 80 %) 60 h en veille (allumé, pas de transmission ou réception sonore) Temps de charge 2 heures (capacité de 80 % à 100 %) 6 mois en télécommande uniquement (capacité de 100 % à 80 %) Durée de vie totale de la pile : celle-ci conserve 80% de sa capacité initiale après 720 cycles de charge/recharge. Cela correspond au minimum à deux années d'utilisation courante.
Sensibilité de l'entrée mini-jack	Max 2Vrms (analogique), impédance : 10 KΩ
Qualité audio ⁵	Mono/20 kHz fréquence d'échantillonnage
Bande passante audio ⁵	80 Hz – 10 kHz (A2DP/entrée externe)
Détails d'appairage	Jusqu'à 8 dispositifs appairés Jusqu'à 5 dispositifs sans fil actifs pris en charge à la fois (2 téléphones, 1 adaptateur TV, 1 microphone et 1 A2DP). Une seule source audio peut être écoutée à la fois.
Conformité Bluetooth	Ver. 2.0 + EDR
Profil Bluetooth	Profil audio (A2DP) 1.2 Profil casques (HSP) 1.2 Profil large bande mains libres (HFP) 1.6

Les mentions « Made for iPod », « Made for iPhone » et « Made for iPad » signifient qu'un accessoire électronique a été conçu spécialement pour être connecté à un iPod, iPhone ou iPad, respectivement, et a été certifié conforme aux normes de performance d'Apple par le développeur. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité avec les normes sécuritaires et réglementaires. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec un iPod, iPhone ou iPad peut influencer sur les performances sans fil.

Apple, le logo Apple, iPhone, iPad et iPod touch sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Android et Google Play sont des marques de Google Inc. Le robot Android est reproduit ou modifié à partir de travaux créés et partagés par Google, et utilisés conformément aux conditions décrites dans la licence d'attribution Creative Commons 3.0.

Portée sans fil ⁶	10 mètres avec Bluetooth de classe 2 Jusqu'à 30 mètres avec l'adaptateur téléphonique ConnectLine 2.0 et l'adaptateur TV 2.0 Jusqu'à 15 mètres avec le Microphone ConnectLine
Portée d'EarStream	0,5 mètre nominal. Le tour de cou doit être utilisé pour une performance optimale.
Portée de transmission des signaux	Sonneries d'appel entrant et fonction de la télécommande jusqu'à 1 mètre.
Fréquence d'émission	3,84 MHz
Indications d'état	Voyants lumineux sur le Streamer Oticon Medical. Signaux sonores dans les aides auditives.
Émissions	Max. -15dBμA / 10 mètres en conformité avec toutes les normes applicables
Humidité de fonctionnement	<85% d'humidité relative
Température de fonctionnement	de 10 à 45 °C
Température de stockage	de -20 à 70 °C
Personnalisation du Streamer Oticon Medical	En utilisant le logiciel d'adaptation Genie Medical, qui dispose de l'outil de paramétrage Streamer, un certain nombre de fonctions peuvent être configurées. Fonctionnalités Liaison sécurisée du Streamer Oticon Medical avec les aides auditives Le Streamer Oticon Medical peut être dédié uniquement à une utilisation avec la télévision, le téléphone ou le microphone. Utilisation uniquement en télécommande pour le volume, programme et veille – en dehors de tout Streaming. Téléphones portables Désactive le rejet d'appel, désactive la numérotation du dernier numéro, désactive la commande vocale, choix d'une sonnerie différente pour le téléphone portable, tous les boutons de sélection répondent à l'appel Autres fonctions Désactive le démarrage automatique du casque (par défaut la transmission démarre dès que le câble jack est inséré). Active les alertes sonores entrantes (A2DP) (recevoir les notifications de SMS).
Pièces détachées/accessoires	Clip pour la ceinture Housses de protection Tours de cou noir ou blanc (long - 81 cm, moyen - 66 cm et court - 51 cm)
Compatibilité Application ConnectLine	L'application ConnectLine est compatible avec l'iPhone 6 Plus, l'iPhone 6, l'iPhone 5s, l'iPhone 5c, l'iPhone 5, l'iPhone 4s, l'iPhone 4, l'iPad Air, l'iPad mini avec écran Retina, l'iPad mini, l'iPad (3ème et 4ème génération), l'iPad 2 et l'iPod touch (5ème génération) et avec les smartphones et tablettes Android. L'application ConnectLine avec les aides auditives pré-sélectionnées sans fil Oticon Medical nécessite le Streamer Oticon Medical distribué par Oticon Medical. Lorsque vous utilisez l'application ConnectLine sur un iPad, cherchez les applications pour iPhone dans l'App Store. Le Streamer Oticon Medical est un nouveau produit, qui remplace le produit précédent Ponto Streamer. Veuillez consulter le site www.oticonmedical.fr/connectlineapp pour de plus amples détails sur la compatibilité.

Références :

4. Utilisation du tour de cou et du chargeur fournis
5. La performance audio dépend des aides auditives des utilisateurs
6. Visibilité directe entre le Streamer Oticon Medical et l'autre dispositif